


Подготовка к процедуре лекарственного электрофореза

1. Смочить многоразовые фланелевые прокладки теплой водой 37-39 градусов и отжать.
2. Ввести шприцом во флакон «Карипаин плюс» 10 мл. физраствора.
3. Открыть колпачок флакона «Карипаин плюс» и добавить в него пипеткой две капли «Димексид»
4. Вылить подготовленную субстанцию на одну из фланелевых прокладок. На другую прокладку нанести шприцом 10 мл. «Эуфиллин 2,4%». В случае отсутствия «Эуфиллин», вместо него допускается использование 10 мл. физраствора.

Проведение процедуры лекарственного электрофореза

1. Расположить подготовленные прокладки на теле пациента в соответствии со схемой 1.

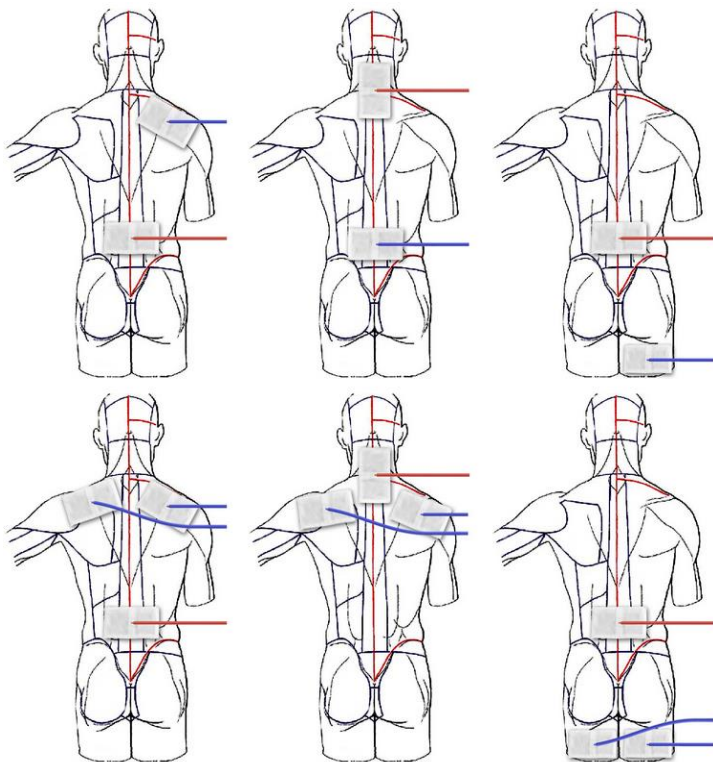

Смотрите видео инструкцию:

www.goo.gl/jLWzhy



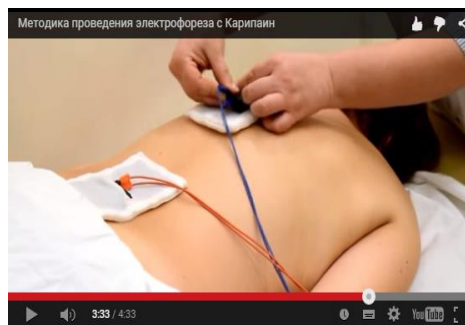


Схема 1. Расположение электродов на теле пациента в зависимости от методики.

2. Подсоединить провода к резиновым электродам при помощи штекера.

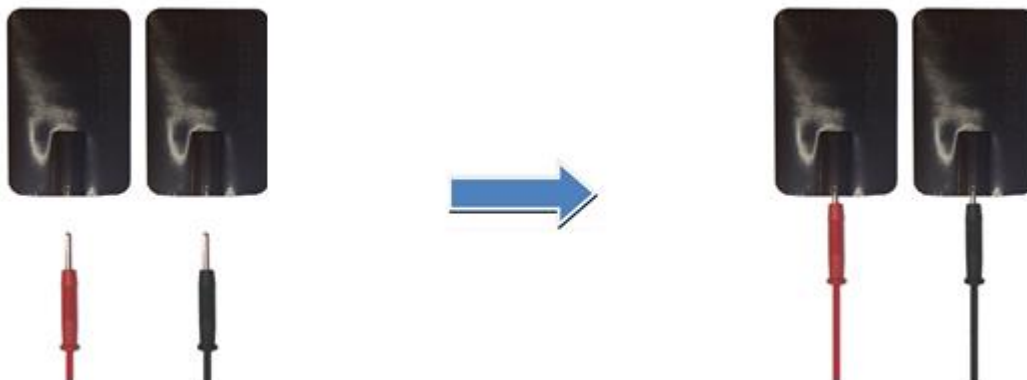

3. Вставить подключённые к проводам резиновые электроды в технический разрез прокладок соблюдая полярность. Один резиновый электрод с красным проводом в прокладку с растровом «Карипаин плюс», и другой резиновый электрод с черным проводом в прокладку с растровом «Эуфиллин».

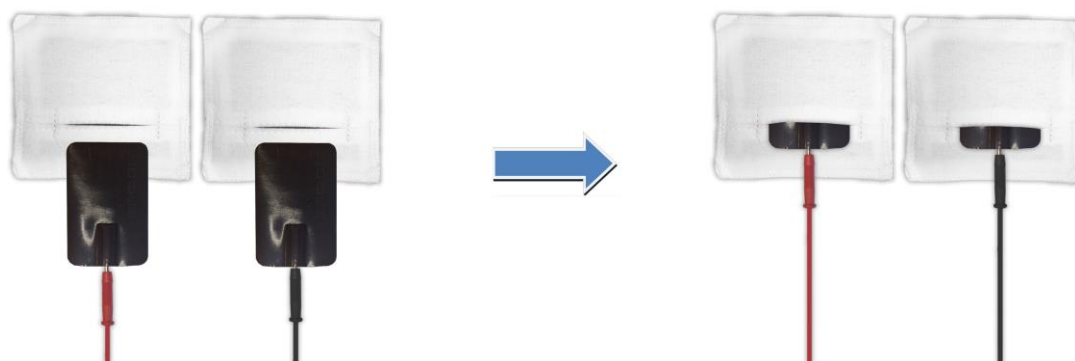

4. Положить теплую грелку (грелки) или иной груз на прокладки с электродами для лучшего соприкосновения с кожей пациента.
5. Подключить к сети аппарат Элфор и включить (согласно прилагаемой к аппарату инструкции).
6. Установить таймер (секундомер) процедуры на 20 мин.
7. Регулятором тока выставить значение в диапазоне от 1 мА до 10 мА. в зависимости от ощущений пациента. Повышать ток необходимо плавно, опираясь исключительно на ощущения пациента (повышать ток до легкого покалывания). Прокладки должны плотно прилегать к телу пациента, это поможет исключить точечный контакт, в области которого могут появиться микроожоги.

Общие рекомендации

Для проведения курса процедур лекарственного электрофореза с помощью набора «Вектор» необходимо дополнительно приобрести в аптеке:

- Физраствор (натрия хлорид) – 20 ампул по 10 мл.
- «Димексид» – 1 флакон,
- «Эуфиллин» 2,4% – 2 упаковки по 10 ампул
- Пипетка – 1 шт.,
- Шприц 10 мл. – 20 шт.,
- Грелка – 1 шт.

Курс лечения составляет 40 процедур лекарственного электрофореза «Карипаин плюс» с перерывом в 1 месяц после 20 процедуры. Ремиссия 3-4 года. Процедуры выполняются систематически (ежедневно), без пропуска. Для удобства рекомендуется использовать дневник пациента.

Процедуры электрофореза желательно проводить вечером за 1-2 часа до сна. После процедуры электрофореза необходимо протереть кожу водно-спиртовым раствором или влажной гигиенической салфеткой. Нанести массирующим движением 2-3 г. «Карипаин ультра гель» на зону, где располагалась прокладка с «Карипаин плюс», после чего отдохнуть 10-15 минут в расслабленном состоянии под одеялом. Утром необходимо также нанести 2-3 г. «Карипаин ультра гель». На случай пропуска процедур электрофореза, необходимо продолжать лечение «Карипаин ультра гель». 2 раза в день. (утром и вечером).

Дневник лекарственного электрофореза

Дата процедуры	Время процедуры	Тип процедуры	Самочувствие от 1 до 10
1)	Утро	Аппликация Карипаин гель	
	Вечер	Электрофорез с Карипаин с.б.	
	Вечер	Аппликация Карипаин гель	
2)	Утро	Аппликация Карипаин гель	
	Вечер	Электрофорез с Карипаин с.б.	
	Вечер	Аппликация Карипаин гель	
3)	Утро	Аппликация Карипаин гель	
	Вечер	Электрофорез с Карипаин с.б.	
	Вечер	Аппликация Карипаин гель	
4)	Утро	Аппликация Карипаин гель	
	Вечер	Электрофорез с Карипаин с.б.	
	Вечер	Аппликация Карипаин гель	
5)	Утро	Аппликация Карипаин гель	
	Вечер	Электрофорез с Карипаин с.б.	
	Вечер	Аппликация Карипаин гель	
6)	Утро	Аппликация Карипаин гель	
	Вечер	Электрофорез с Карипаин с.б.	
	Вечер	Аппликация Карипаин гель	
7)	Утро	Аппликация Карипаин гель	
	Вечер	Электрофорез с Карипаин с.б.	
	Вечер	Аппликация Карипаин гель	
8)	Утро	Аппликация Карипаин гель	
	Вечер	Электрофорез с Карипаин с.б.	
	Вечер	Аппликация Карипаин гель	
9)	Утро	Аппликация Карипаин гель	
	Вечер	Электрофорез с Карипаин с.б.	
	Вечер	Аппликация Карипаин гель	
10)	Утро	Аппликация Карипаин гель	
	Вечер	Электрофорез с Карипаин с.б.	
	Вечер	Аппликация Карипаин гель	

11)	Утро		Аппликация Карипаин гель	
	Вечер		Электрофорез с Карипаин с.б.	
	Вечер		Аппликация Карипаин гель	
12)	Утро		Аппликация Карипаин гель	
	Вечер		Электрофорез с Карипаин с.б.	
	Вечер		Аппликация Карипаин гель	
13)	Утро		Аппликация Карипаин гель	
	Вечер		Электрофорез с Карипаин с.б.	
	Вечер		Аппликация Карипаин гель	
14)	Утро		Аппликация Карипаин гель	
	Вечер		Электрофорез с Карипаин с.б.	
	Вечер		Аппликация Карипаин гель	
15)	Утро		Аппликация Карипаин гель	
	Вечер		Электрофорез с Карипаин с.б.	
	Вечер		Аппликация Карипаин гель	
16)	Утро		Аппликация Карипаин гель	
	Вечер		Электрофорез с Карипаин с.б.	
	Вечер		Аппликация Карипаин гель	
17)	Утро		Аппликация Карипаин гель	
	Вечер		Электрофорез с Карипаин с.б.	
	Вечер		Аппликация Карипаин гель	
18)	Утро		Аппликация Карипаин гель	
	Вечер		Электрофорез с Карипаин с.б.	
	Вечер		Аппликация Карипаин гель	
19)	Утро		Аппликация Карипаин гель	
	Вечер		Электрофорез с Карипаин с.б.	
	Вечер		Аппликация Карипаин гель	
20)	Утро		Аппликация Карипаин гель	
	Вечер		Электрофорез с Карипаин с.б.	
	Вечер		Аппликация Карипаин гель	

